

PID: Mini-GDH-Basic

UID: 060-10-1-Mini-GDH-Basic-0


Ostatnia aktualizacja: 24.06.2021 12:19



SYSTEM SAFEVIEW MINI-2 Z CIEMNIĄ GDH-BASIC



INNE ZDJĘCIA

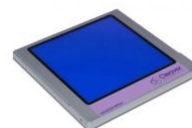

OPIS OGÓLNY

Dzięki zwartej konstrukcji transiluminator **safeVIEW-Mini2** stanowi doskonałą stację roboczą do przeglądania i pracy z żelem barwionym fluorescencyjnie. Niebieskie źródło światła ma tę dodatkową zaletę, że nie powoduje uszkodzenia DNA ani RNA, które normalnie wiązałyby się ze światłem UV. Oddzielny bursztynowy ekran filtracyjny 580 nm i cieńsza lekka obudowa w połączeniu z rozmiarem obrazu 153 x 153 mm oznacza, że można go używać do wyświetlania małych i średnich żeli i jest kompatybilny z multiSUB mini, midi i wybranymi poziomymi komorami do elektroforezy. **safeVIEW-Mini2** może być również używany z osłoną do obrazowania GDH-BASIC w celu zmniejszenia światła w tle, umożliwiając robienie zdjęć żeli za pomocą aparatu w telefonie komórkowym.

Przenieś obrazy z telefonu do oprogramowania analitycznego. Idealny do zastosowań edukacyjnych lub tam gdzie ważne są niskie koszty!

Właściwości:

- cienka i lekka obudowa wykonana z aluminium,
- łatwy do przenoszenia między laboratoriami,
- doskonałe rozproszenie ciepła,
- oszczędny,
- bezpieczne światło niebieskie 470 nm.

MODELE

- **safeVIEW-Mini2** - transiluminator światła niebieskiego 15,3 x 15,3 z filtrem i ciemnią

CERTYFIKATY

CE

MODEL	safeVIEW-Mini2
Wymiary (W x D x H) [cm]	20 x 20 x 1,39
Powierzchnia obrazowania [cm]	15,3 x 15,3
Źródło światła niebieskiego [W]	15
Podstawa iluminatora	płaska
Długość fali [nm]	470
Automatyczne wyłączenie	po ok. 6 min
Materiał obudowy	aluminium
Ciemnia	GDH-BASIC
Zasilanie	DC 12 V, 2 A
Waga [g]	ok. 760

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ciemnia GDH,
- bursztynowy ekran filtracyjny 580 nm.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl